



Namiki Medical Instruments

ニッポンのクスコーメーカーナミキの新製品

特許
第6516339号

円錐切除手術時の 煙とニオイを低減します!

375-38 排煙 桜井式腔鏡

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ロング L 375-38L | 標準型 L 375-38HL |
| ロング M 375-38M | 標準型 M 375-38HM |
| ロング S 375-38S | 標準型 S 375-38HS |

蝶番部・押し上げネジ
取り付け部ビスなし仕様



※写真はイメージです



視界良好

ニオイ低減

吸引装置やチューブは付属しません。
お使いの病院様でご用意ください。

円錐切除手術・
レーザー蒸散対応。
視界をさえぎる
煙やニオイを吸い込む
吸引口が付いた腔鏡です。



挿入部の形状は
ロング型と
標準型の
2種類。



ロング型

標準型

見本をお貸しいたします。お気軽にご依頼ください。



Namiki Medical Instruments

株式会社 ナミキ・メディカルインストゥルメンツ

円錐切除手術時の煙とニオイを低減します

375-38

排煙 桜井式腔鏡

材質	真ちゅう	洋白	ステンレス
表面処理	ブラッククロームメッキ(絶縁性なし)		
サイズ	ロング L 375-38L	標準型 L 375-38HL	
	ロング M 375-38M	標準型 M 375-38HM	
	ロング S 375-38S	標準型 S 375-38HS	
薬機法分類	クラスI 一般医療機器		

■サイズ表(m/m)

	a部	b部	c部
ロングL	26	108	50
ロングM	24	99	49
ロングS	21	93	45
標準型L	31	79	51
標準型M	28	75	48
標準型S	25	69	44

特許
第6516339号



※1

国産品 動作不良3年間修理無料 見本貸出可 名入れ無料


※1 ご使用にともなって生じるキズやコーティングの劣化等は対象外となります。

本器具と吸引装置を
チューブでつないでください。
弁の内側の吸引口が
電気メスやレーザーによる
煙やニオイを吸い込み、
クリアな術野を確保します。※2

【使用上のご注意】

本製品に絶縁性はありません。
電気メスなどを併用する際は感電・火傷などに
十分ご注意ください。

※2 吸引装置やチューブは付属しません。
お使いの病院様でご用意ください。

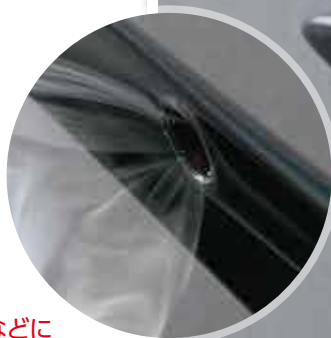

ナミキの
桜井式腔鏡は
ここが違う!

蝶番部・押し上げネジ取り付け部ビスなし仕様による高耐久性

弁の蝶番部に埋め込み式ピン、押し上げネジ取り付け部には特種ピンを使用しているため、
ビスのような経年変化によるゆるみ・はずれなどが発生しにくい構造です。

製造販売元



Namiki Medical Instruments

手術用器具開発工房

株式会社 ナミキ・メディカルインストゥルメンツ

〒132-0035 東京都江戸川区平井7-14-11

TEL.03-3610-0375 FAX.03-3610-3777

E-mail info@namiki-mi.co.jp

URL http://www.namiki-mi.co.jp